



VINOBLE COSMETICS



4D LASER LIGHT THERAPY MASK

STUDIEN BELEGEN FOLGENDE HAUTVERBESSERUNGEN

- Reduzierung der Krähenfüße
- Reduzierung der Augenringe
- Reduzierung der Falten
- Verbesserung der Hautdichte
- Reduzierung von Hautunebenheiten
- Strahlendere Haut, mehr Glow

4D ANTI-AGING TECHNOLOGIE


- Stimuliert die Mikrozirkulation
- Verbesserung der zellulären Aktivität
- Löst stoffwechsel-erzeugte Pigmentierung auf und verjüngt gleichzeitig
- Stärkung der Hautdichte und -elastizität
- Sichere, nicht-invasive Methode für ein strafferes Hautbild
- Präziser Lichtwinkel und Kombination verschiedener langer Lichtwellen, um die Haut Schicht für Schicht zu durchdringen
- 140 gebündelte Lichtstrahlen, die das Licht gezielt in den Gesichtszonen verteilen

ANWENDUNG




SCHRITT 1 Reinige dein Gesicht gründlich und achte darauf, dass die Haut sauber und trocken ist.


SCHRITT 2 Passe den Klettverschluss an und setze die Maske auf.

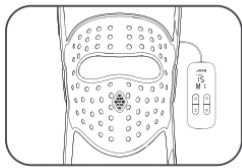

SCHRITT 3 Halte die Ein-/Aus-Taste am Controller 2 Sek. lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Licht geht an.

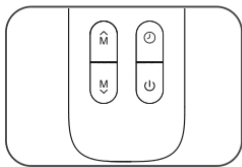

SCHRITT 4 Drücke kurz die Timing-Taste, um die Behandlungsdauer einzustellen. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist T1: 15 Minuten.

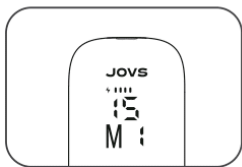

SCHRITT 5 Es gibt 3 Modi. Stelle den für dich passenden Modus ein, indem du auf den Pfeil nach oben (höherer Modus) oder auf den Pfeil nach unten (niedrigerer Modus) klickst.



SCHRITT 6 Genieße die Behandlung bis diese beendet ist und das Gerät sich automatisch ausschaltet. Trage anschließend deine Pflege auf (Empfehlungen unten).

THERAPIE-LEITFADEN UND EMPFEHLUNGEN

Reife Haut

- Modus M3 (20 Minuten)
- Pflege danach: firming essence

Sensible, leicht unreine Haut

- Modus M1 (10 min.) + M3 (10 min.)
- Pflege danach: purifying essence

Haut mit Pigmentflecken

- Modus M2 (10 min.) + M3 (10 min.)
- Pflege danach: brightening concentrate

Trockene Haut

- Modus M1 (10 min.) + M3 (10 min.)
- Pflege danach: hydrating essence